

Focus Acrylic™

*By
eyePx*



**eyePx - Model 600 Hydrophobic Acrylic
Foldable Intraocular Lens
UV Blocker**

Focus Acrylic™


MODEL 600

An acrylic IOL designed to give you all the advantages of hydrophobic acrylic IOL's with none of the compromises. We invite you to evaluate Model 600

Lente Hidrofóbica de 3 piezas

El modelo 600 de Focus Acrylic es una lente de 3 piezas de acrílico hidrofóbico altamente compatible con óptica de translucencia avanzada y filtro UV. **Sus hápticas color azul son fabricadas en fluoruro de polivinilideno (Kynar™)** con 5° de angulación, y su forma es en "C" modificada, para lograr un diámetro total de 12,5mm, que permite su implante tanto en la cápsula como en el sulcus debido a su máxima flexibilidad y memoria. La óptica biconvexa es de 6mm netos con bordes rectos. Su colocación se realiza mediante una incisión de 2,4mm usando el inyector de titanio reusable EL-22M Epsilon junto con el cartucho OD502.


Proven Design Properties

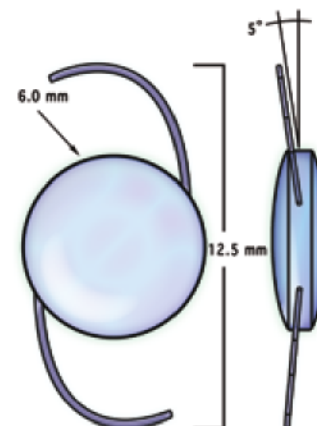

Información Biométrica:

Modelo: Focus 600
Fabricante: EyePx

Constante A: 118.5
Haigis:
a0: 1.55
a1: 0.40
a2: 0.10
Hoffer: pACD: 5.75
Holladays-1: sf: 1.98
Holladays-2: ACD: 5.75
SRK-T: A: 119.3
SRK-2: A: 119.6

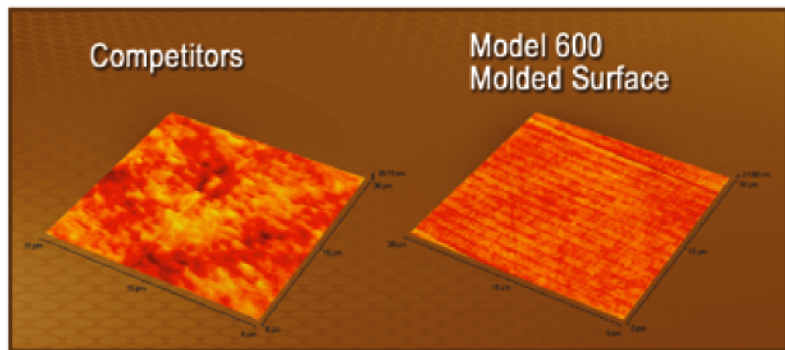

Acrylic Lens Surface Comparison

Fabricado por:



Importado por:



Fabricado por eyePx, LLC. 92340 Bourg La Reine, France

VSA Alta Complejidad S.A. - Ernesto de las Carreras 2459 - (B1643AVK) - Beccar - Prov. de Buenos Aires - Argentina.

Teléfono : (54-11) 4723-4433 - info@vsa-ac.com.ar



PIN 100487-001
REV C